




TERUMOBCCT
Unlocking the Potential of Blood

СЕПАРАТОР **SPECTRA OPTIA**

ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АФЕРЕЗА И КЛЕТОЧНОЙ
ТЕРАПИИ НА НОВУЮ СТУПЕНЬ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ

ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЕМАЯ БОГАТСТВОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ТОЧНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА, ОБЛАДАЮЩАЯ НЕБЫВАЛОЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ

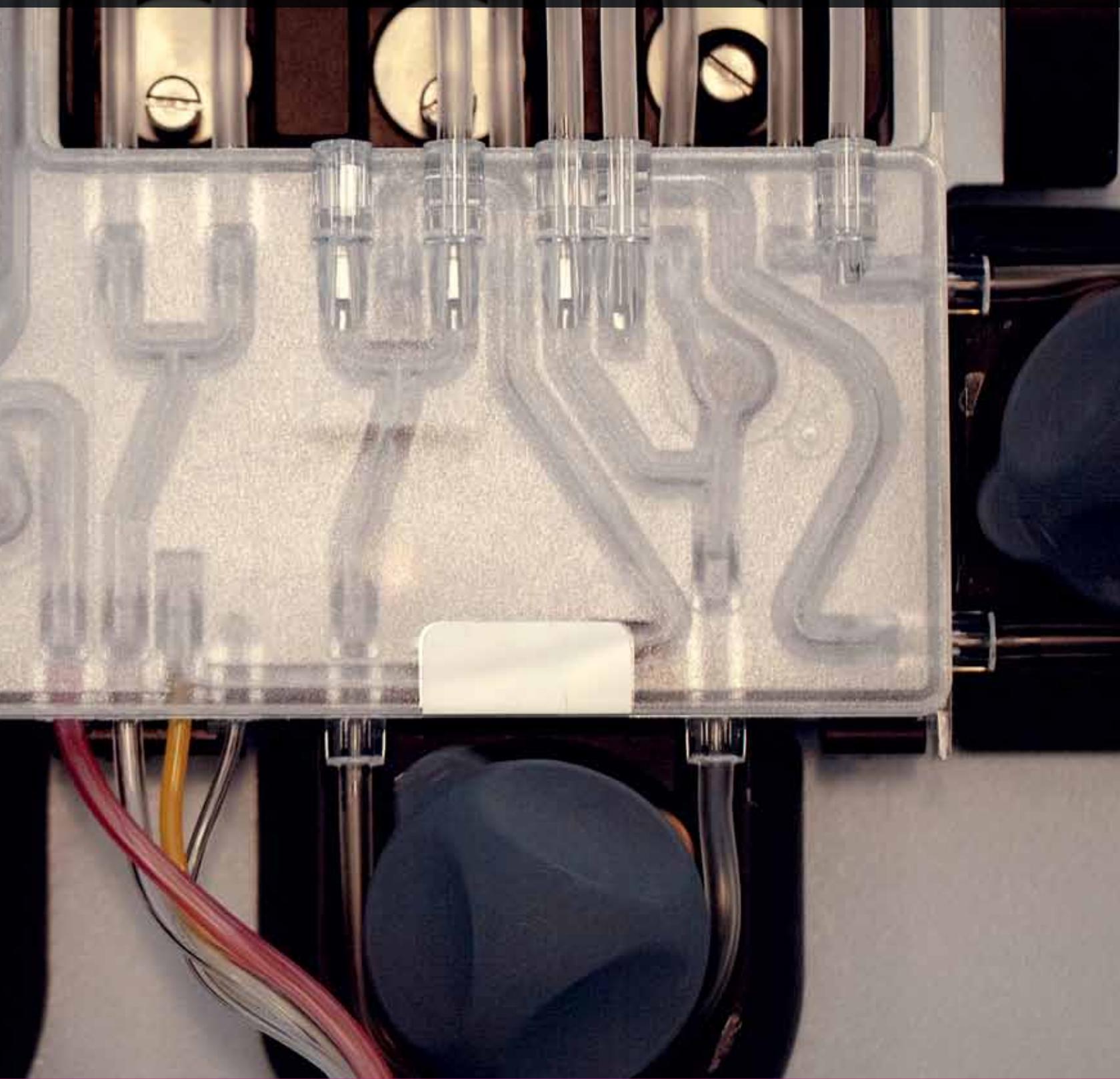


Принцип работы

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦЕЙ РАЗДЕЛА (САУ)

При помощи системы оптического обнаружения САУ непрерывно управляет разделенными фракциями, позволяя накапливаться слоям тромбоцитов и лейкоцитов. Затем по указанию САУ сепаратор эффективно извлекает целевые компоненты.

- Автоматизация настроек границы раздела с сохранением операторского контроля над ходом процедуры
- Непрерывный мониторинг и интерпретация положения границы раздела, освобождающие оператора от необходимости полагаться исключительно на визуальные наблюдения
- Помощь оператору в эффективном извлечении целевых компонентов
- Высокая степень достижения прогнозируемых результатов благодаря стабильности границы раздела

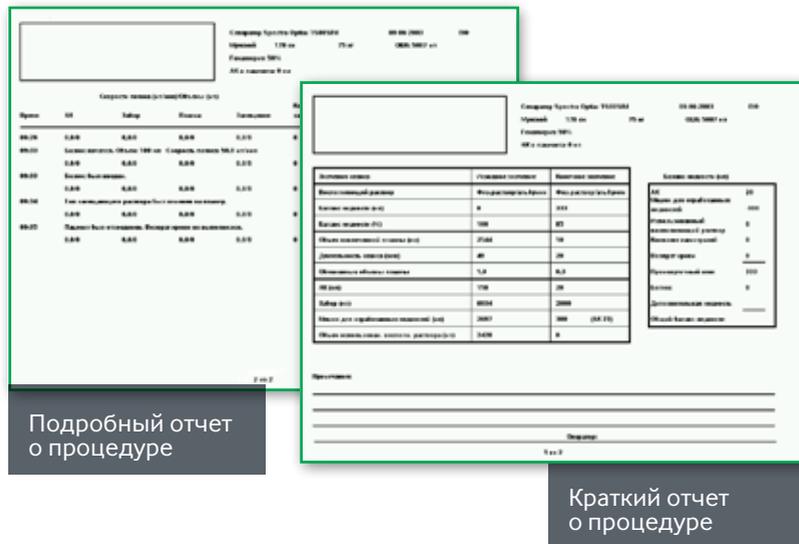

УДОБНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

- Печать отчетов или экспортирование данных
- Регистрация и сохранение данных процедуры, уменьшающие необходимость в ручной записи информации
- Помощь в обеспечении соответствия нормативно-правовым требованиям
- Отслеживание и регистрация сигналов тревоги, возникающих во время процедур
- Доступ к списку, включающему до 100 предшествующих процедур

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА

- Точная работа насосов способствует оптимизации баланса жидкости
- Комплект магистралей для малого объема жидкости предназначен для пациентов с небольшой массой тела
- Система выполняет проверку с целью подтверждения соответствия установленного комплекта магистралей выбранной процедуре
- Автоматизация процедуры позволяет уделять больше времени заботе о пациентах и донорах
- Почти бесшумная работа оборудования не тревожит пациента

Сотрудничество с заказчиками

Мы придаем большое значение всем без исключения аспектам нашего взаимодействия с заказчиками. Открытость и продолжительный характер деловых взаимоотношений с нами приносит дополнительную пользу нашим заказчикам и, главное, пациентам, являющимся основным объектом нашей совместной профессиональной деятельности.

Даже после того как оборудование установлено, наша компания продолжает вести работу с заказчиками по следующим направлениям:

- Обучение и инструктирование
- Техническая поддержка
- Клиническая и научная поддержка
- Клиентское сопровождение
- Группы пользователей и профессиональные сети

Интуитивно-понятный графический интерфейс пользователя

- Открывает доступ к требуемой информации, которая отображается на цветном сенсорном экране с высоким разрешением
- Направляет действия оператора на всех этапах процедуры
- Помогает вводить необходимую информацию о пациенте и процедуре
- Своевременно предоставляет нужную информацию, помогая повысить отдачу от проводимой процедуры
- Отображает понятно составленные предупреждающие сообщения в удобном для быстрого прочтения формате

Интегрированная система Seal Safe для запаивания магистралей

Готовые к использованию комплекты магистралей, предназначенные для процедур различных типов

- Установка неподвижно фиксируемой кассеты выполняется в несколько этапов
- Система контролирует соответствие установленного комплекта магистралей выбранной процедуре
- Комплект магистралей для малого объема жидкости предназначен для пациентов с небольшой массой тела
- Уменьшенные размеры комплектов для магистралей позволяют экономить пространство для хранения

Высоко маневренная система

- Выдвижная, легко поднимающаяся и опускающаяся инфузионная стойка
- Складной экран для более легкого перемещения и хранения
- Большие, прочные колеса на вращающихся роликах обеспечивают отличную маневренность при перемещении сепаратора
- Высокотехнологичная ножная педаль позволяет при необходимости перемещать сепаратор или предотвращать его смещение

Размеры

- Вес: 91,6 кг (220 фунтов)
- Высота (инфузионная стойка опущена): 115,6 см (45,5 дюйма)
- Высота (инфузионная стойка поднята): 174 см (68,5 дюйма)
- Ширина: 52,7 см (20,75 дюйма)
- Глубина: 81,3 см (32,0 дюйма)
- Необходимая площадь пола: 0,43 м² (4,6 фута²)



Аппарат с установленным комплектом магистралей для процедуры терапевтического плазмафереза.

TERUMOBCT
Unlocking the Potential of Blood

Terumo BCT, Inc.

10811 West Collins Ave.
Lakewood, Colorado 80215-4440
USA (США)

Телефон в США: 1.877.339.4228
Тел.: +1.303.231.4357
Факс: +1.303.542.5215

Terumo BCT Europe N.V.

Europe, Middle East and Africa
Ikaroslaan 41
1930 Zaventem
Belgium (Бельгия)

Тел.: +32.2.715.05.90
Факс: +32.2.721.07.70

Terumo BCT (Asia Pacific) Ltd.

Room 3903-3903A, 39/F
ACE Tower, Windsor House
311 Gloucester Road
Causeway Bay, Hong Kong (Гонконг)

Тел.: +852.2283.0700
Факс: +852.2576.1311

Terumo BCT Latin America S.A.

La Pampa 1517-12th Floor
C1428DZE
Buenos Aires
Argentina (Аргентина)

Тел.: +54.11.5530.5200
Факс: +54.11.5530.5201

Terumo BCT Japan, Inc.

Ebisu South One Bldg. 9F
1-7-8, Ebisu-minami, Shibuya-ku
Tokyo 150-0022
Japan (Япония)

Тел.: +81.3.6743.7890
Факс: +81.3.6743.9800

©2013 Terumo BCT, Inc. / Номер по каталогу 306610830

UNLOCKING THE POTENTIAL OF BLOOD | TERUMOBCT.COM